

## LIMITED WARRANTY

### What does the Warranty Cover?

Pelstar LLC scales are warranted from date of purchase against defects of materials or in workmanship for a period of one (1) year. If product fails to function properly, return the product, prepaid and properly packed to Pelstar. If manufacturer determines that a defect of material or in workmanship exists, customers' sole remedy will be repair or replacement of scale at no charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All parts including repaired and replaced parts are covered only for the original warranty period.

### Who is Covered?

The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Pelstar dealers or retail stores selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

### What is Excluded?

Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instruction, abuse including tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alternations. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.

Call 1-800-815-6615 to get Warranty Service.

## GARANTÍA LIMITADA

### ¿Qué Cubre la Garantía?

Las balanzas de Pelstar LLC están garantizadas a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación y mano de obra por un periodo de un (1) año. Si el funcionamiento del producto no fuese adecuado, regrese el producto a Pelstarcon fletes prepagados y en un embalaje adecuado. Si el fabricante determinase la existencia de un defecto de fabricación o mano de obra, el remedio único será la reparación o remplazo de la balanza sin cargo alguno para el cliente. El replazo se realizará con un equipo o componente nuevo o remanufacturado. Si el productose encontrase fuera de producción se le remplazará con un producto similar del mismo o mayor valor. Todas las partes, incluyendo las partes separadas o remplazadas, están cubiertas únicamente durante el periodo original de la garantía.

### ¿Quién Está Cubierto?

El comprador original del producto debe poder comprobar la compra para hacer válida la garantía. Los distribuidores o minoristas de Pelstar no tienen derechos para alterar, modificar, o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

### ¿Quién Está Excluido?

La garantía no cubre el desgaste normal de las partes o daños como resultado de: Uso negligente o mal uso del equipo, uso de voltajes o corrientes inapropiadas, utilización contraria a las instrucciones de operación, abuso incluyendo

modificaciones, daños en transporte, reparaciones o alteraciones no autorizadas. Más aún, la garantía no cubre sucesos naturales como fuego, inundaciones, huracanes o tornados. Esta garantía le da a Ud. derechos legales específicos, puede tener además otros derechos que varían de país a país, estado a estado, provincia a provincia o jurisdicción a jurisdicción.

Llame a 1-800-815-6615 para obtener su servicio por garantía.

## GARANTIE LIMITÉE

### Que couvre la garantie?

A compter de la date d'achat, les pèse-personnes Pelstar LLC sont garantis contre les défauts de matériel ou de fabrication pour une période d'un (1) an. Renvoyez à Pelstar, port payé et bien emballé, le produit qui fonctionne mal. Si le fabricant constate un défaut de matériel ou de fabrication, le pèse-personne sera réparé ou changé sans aucun frais pour le client. Le remplacement se fera avec un produit ou composant neuf ou corrigé. Si le produit n'est plus disponible, le remplacement se fera par un appareil similaire d'une valeur égale ou supérieure. Les frais de toutes les pièces réparées ou changées sont couvertes seulement pour la période de garantie originale.

### Qui est couvert par la garantie?

Le premier acheteur du produit doit avoir les pièces justificatives de l'achat lui donnant droit au service de garantie. Les concessionnaires ou les détaillants des produits Pelstar n'ont pas le droit de modifier ou de changer les termes et conditions de cette garantie.

### Ce que la garantie ne couvre pas.

Votre garantie ne couvre pas une usure normale des pièces ou un dommage résultant des éléments suivants: négligence ou mauvais usage du produit, branchement sur un courant ou un voltage non approprié, usage non conforme au mode d'emploi, abus comprenant le fait de trifouiller l'appareil, le dommage occasionné pendant le transport, les réparations alternance sans autorisation. De plus, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles comme l'incendie, l'inondation, l'ouragan et la tornade. Cette garantie vous donne des droits légitimes spécifiques. Le client peut également bénéficier de certains autres droits qui varient selon les pays, les états, les provinces ou les juridictions.

Contactez le Service Garanties au 1-800-815-6615.

Another innovation from the people at




Health o meter®  
Professional

7400 West 100th Place, Bridgeview IL 60455 • 1-800-815-6615  
www.healthometermedical.com

Health o meter® Professional products are manufactured, designed and owned by Pelstar LLC.  
Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products Inc., Boca Raton, FL 33431

Health o meter®  
Professional

## OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN MODE D'EMPLOI

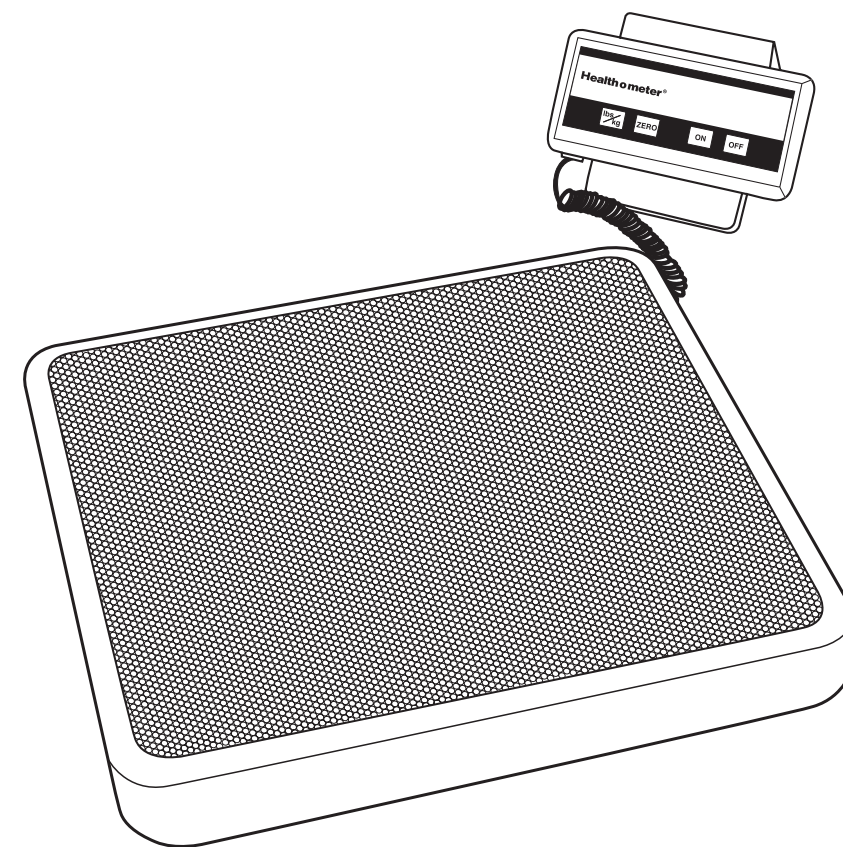

## PHYSICIANS REMOTE READ DIGITAL SCALE

MODEL: 320KL / 349KLX

## BALANZA DIGITAL DE PISO CON LECTOR REMOTO PARA MÉDICOS


MODELO: 320KL / 349KLX

## BALANCE NUMÉRIQUE PROFESSIONNELLE DE PLANCHER AVEC AFFICHAGE À DISTANCE

MODÈLE: 320KL / 349KLX

# PHYSICIANS REMOTE READ DIGITAL SCALE

MODELS: 320KL / 349KLX

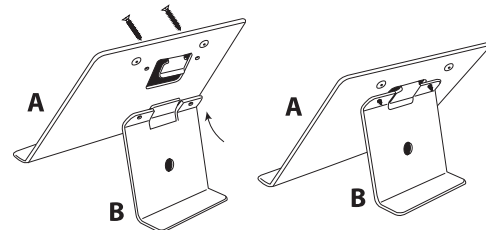

old Part A (Stand) with the knobs facing away from you. Slide the center tab of Part B (Support) up and under the tab on the back of the Stand. Be sure to align the two parts, so that the tab on the Support can slide beneath the tab on the rear of the Stand. The holes on both parts of the bracket should now line up.

- Turn the bracket over so Part A is facing you and insert the two screws (included) into the holes and through the openings in Part B.
- Using a Phillips head screwdriver, tighten the screws to secure Part B to Part A.
- Align the holes in the back of the remote display head with the protruding knobs on the bracket. The remote head should slide down onto the knobs, firmly and securely. The display bracket is now ready for use.

## MAINTENANCE

**PROTECT YOUR SCALE FROM SHOCK, OVERLOAD, LIQUID SPILLS, EXTREME TEMPERATURES, OTHER ABUSES.** Preserve the finish of the scale by wiping only with damp, soft cloth and mild, nonabrasive detergent.

## SPECIFICATIONS

**Dimensions:**  
Remote Head: 5" x 3" x 1 1/4"  
Platform Size: 12" x 12 1/4" x 2 1/4"  
Power Source: 9 Volt battery or 110V AC adapter output: 9V DC 200 mA (included).

Model	Capacity	Resolution
320	400 lb / 180kg	0.5 lb / 0.2kg
349	400 lb / 180kg	0.2 lb / 0.1kg

# BALANZA DIGITAL DE PISO CON LECTOR REMOTO PARA MÉDICOS

MODELOS 320KL / 349KLX

X

## USO DE LA BALANZA

**LB/KG:** Pulse este botón para cambiar la unidad de medida en el visor. Esta balanza pesa en libras (LB) o en kilogramos (KG).\*\*

**ZERO:** Pulse este botón para llevar a cero el valor en el visor:0.0

## Preparación de la balanza

- Retire el protector de material plástico del visor.
- Enchufe el cable tipo telefónico espiralado en el extremo inferior izquierdo del cabezal remoto.
- Coloque la balanza en el piso, en una superficie nivelada y sin vibraciones.
- Oprima "ON". Espere a que en el visor se muestren los ceros con la unidad de medida usada por última vez (para cambiar la unidad de medida, vea la sección "Uso de la balanza: LB/KG" más arriba). Ya puede comenzar a pesar.
- Siempre espere a que el visor vuelva a cero antes de pisar la plataforma.

## Características especiales

**APAGADO AUTOMÁTICO:** La balanza se apagará automáticamente después de aproximadamente 2 minutos sin actividad.

**DESACTIVACIÓN DEL APAGADO AUTOMÁTICO:** Mantenga presionado el botón "LB/KG" mientras la balanza esté apagada. Presione "ON" mientras mantiene presionado el botón "LB/KG". En el visor se mostrará "A\_of". La balanza permanecerá encendida hasta que se apague manualmente.

## Significado de los mensajes

"oooo": se excedió la capacidad de la balanza

"-3.0": peso negativo, oprima ZERO para ajustar la balanza

"bAtt": Si parpadea, la batería tiene poca carga

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Esta balanza funciona con una batería de 9 V o un adaptador de 110 V CA/9 V CC 200 mA (incluida).

**CÓMO USAR LA BATERÍA:** El compartimento para la batería se encuentra en la parte posterior del cabezal del visor remoto. Respete los polos ± al instalar la batería.


**CÓMO USAR EL ADAPTADOR:** En primer lugar, enchúfelo en la parte inferior derecha del cabezal remoto y luego, al tomacorriente.

**NOTA:** Cuando se usa el adaptador de CA, si en el visor se muestra "-----" y números, invierta la posición del adaptador en el tomacorriente.

## INSTALACIÓN DEL CABEZAL REMOTO

El cabezal remoto se conecta a la balanza con un cable tipo telefónico, espiralado. Se puede instalar en una pared a una distancia máxima de la base de 2,70 m o bien, en el pedestal de visualización (incluido) para colocar en un escritorio a una distancia máxima de la base de 2,70 m.

## Instalación en una pared

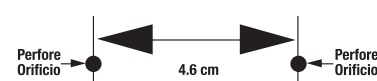

- Use el diagrama de más arriba para localizar la posición de los tornillos a la altura correcta.


\*\*Después de apagado, la escala recordará la unidad de la medida pasada seleccionada. Para evitar que la unidad sea cambiada, llame por favor la Ayuda Técnica en (800) 638-3722 para desactivar el botón de LB/KG.

- Perfore dos orificios a 4,6 cm de distancia entre sí.

- Instale los dos tornillos en la pared dejando que sobresalgan 3 mm. La balanza se podría dañar si los tornillos sobresalen más.

- Alinee los orificios en la parte posterior del cabezal remoto con los tornillos. El cabezal debería deslizarse por los tornillos con firmeza y seguridad.

## Instalación en el pedestal de visualización

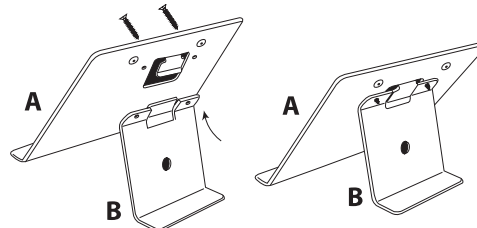

- Sujete la parte A (pie) de modo que las perillas no estén orientadas hacia usted. Deslice la lengüeta central de la parte B (soporte) hacia arriba y por debajo de la lengüeta en la parte posterior del pie. Asegúrese de alinear las dos partes de modo que la lengüeta del soporte pueda deslizarse por debajo de la lengüeta en la parte posterior del pie. Ahora, los orificios en ambas partes del pedestal deberían estar alineados.

- Invierta la posición del pedestal de modo que la parte A esté orientada hacia usted e introduzca los dos tornillos (incluidos) en los orificios y a través de las aberturas de la parte B.

- Use un destornillador Phillips para apretar los tornillos de la parte B a la parte A.

- Alinee los orificios en la parte posterior del cabezal de visualización remoto con las perillas salientes del pedestal. El cabezal debería deslizarse por las perillas con firmeza y seguridad. El pedestal está listo para ser usado

## MANTENIMIENTO

**PROTEJA LA BALANZA CONTRA GOLPES, SOBRECARGA, DERRAMES, TEMPERATURAS EXTREMAS Y OTRO TIPO DE MALTRATO.** Para resguardar la terminación de la balanza límpiela únicamente con un paño blando humedecido en una solución suave de detergente no abrasivo.

## ESPECIFICACIONES

**Dimensiones:**  
Cabezal remoto: 12,7 x 7,6 x 3,2 cm  
Plataforma: 30,5 x 31,1 x 5,7 cm  
Fuente de alimentación: Batería de 9 Voltios o salida de adaptador de 110 V CA/9 V CC 200 mA (incluida).


Modelo	Capacidad	Resolución
320	400 libras/180 kg	0.5 lb/0,2 kg
349	400 libras/180 kg	0.2 lb/0,1 kg

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Detalles en la parte posterior.

Su utilización en el comercio no es legal.

2

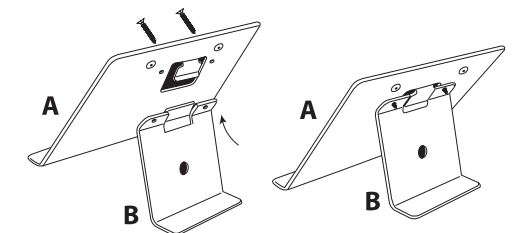

2


## GARANTIE LIMITÉE UN AN

Voir détails au verso

0.5 lb

0.2 lb 0.1

\*\*Après mise hors tension, la balance se rappellera de la dernière unité de mesure utilisée. Pour empêcher le changement de l'unité, veuillez contacter le Service Technique à (800) à 638-3722 pour désactiver la touche LB/KG.

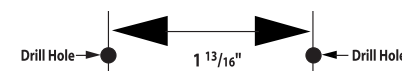

## ONE YEAR LIMITED WARRANTY

See back for details.

Not legal for trade.

\*\*After being shut off, the scale will remember the last unit of measure selected. To prevent the unit of measure from being changed, please contact Technical Support at (800) 638-3722 to deactivate the LB/KG button.